

Stratacel®

apósito avanzado para el cuidado
de tratamientos fraccionados


Innovación en el cuidado post-procedimiento



Reduce el
tiempo de
recuperación
a la mitad¹

"El novedoso apósito para heridas (Stratacel®), redujo los signos de inflamación aguda tras procedimiento de microneedling y radiofrecuencia, en comparación con el tratamiento estándar sin que se produjeran efectos adversos y con un resultado más favorable desde el punto de vista del paciente."

Gold, M., et al. (2019). J of cosmetic dermatology, 18 (2)

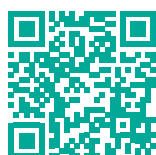

www.es.stratacel.com

 **Stratapharma**
Iberia

La importancia del cuidado post-procedimiento

Los procedimientos fraccionales mínimamente invasivos se han vuelto más populares debido a la llegada de tecnologías más sofisticadas que lesionan cuidadosamente y en precisión la piel a varias profundidades.²

Tras el tratamiento correcto, incluso con las tecnologías y técnicas más nuevas, **el cuidado post-procedimiento sigue siendo tan crucial como el procedimiento mismo** y clave para lograr el mejor resultado, la satisfacción del paciente y la reducción del tiempo de inactividad.²

Es importante **restaurar la barrera cutánea creando un ambiente ideal para mejorar la curación, reducir el riesgo de infección y proteger la piel de otros irritantes** que puedan comprometerla o empeorar la condición cutánea.

La rápida reducción del tiempo de recuperación y la gravedad de las respuestas post-operatorias se traduce en la satisfacción del paciente con el procedimiento y el resultado general del tratamiento.¹

Opciones de tratamiento post-procedimiento actuales

Los cuidados post-procedimiento completamente oclusivos, como los productos a base de vaselina, no son ideales porque **no permiten que el calor penetre** fácilmente desde la herida o la superficie de la piel dañada. Pueden promover la maceración de la herida, la suavización y el deterioro de la piel, y están relacionados con el eritema e inflamación.¹

Las cremas y humectantes no son ideales ya que no crean un ambiente de curación de heridas húmedo, siendo un hecho que la **piel comprometida se cura un 40% más rápido cuando se mantiene húmeda.**¹

Los apósitos físicos, como las mascarillas, **no son ideales ya que son engorrosas de aplicar en la cara de un paciente** para asegurar el contacto completo con el área tratada, especialmente en áreas como los párpados y los borde bermellón. **Por esta razón, la opción preferida son las cremas o geles tópicos.**¹

Un producto ideal debería **acelerar la curación, reducir los efectos secundarios y proteger la piel.** Además, debería ser **transparente, semipermeable y fácil de aplicar en casa.**^{1,2}



Stratacel® - Cuidado post-procedimiento de primera línea¹

- ACORTA EL TIEMPO DE RECUPERACIÓN** ➤ Al aplicar Stratacel después, de solo 2 días después del procedimiento, el tiempo de recuperación se reduce a la mitad en comparación con los productos de cuidado estándar.
- SATISFACCIÓN DEL PACIENTE** ➤ Stratacel ayuda a una curación más rápida y reduce los síntomas agudos, mejorando el resultado general del tratamiento visible y la satisfacción del paciente.
- PIEL SE MANTIENE HIDRATADA** ➤ Stratacel fue desarrollado con una **consistencia especial para adherirse suavemente a la epidermis existente**, lo que lo convierte en un **apósito post-procedimiento ideal** después de las lesiones cutáneas fraccionales.
- APÓSITO PARA HERIDAS** ➤ Stratacel es un Producto Sanitario de Clase I, registrado en la FDA y de Clase IIa de Conformidad Europea.



Indicaciones de Stratacel®


Stratacel es un apósito de heridas flexible y avanzado que forma una película **para la reparación de la piel dañada o comprometida después de procedimientos fraccionales.**

INDICACIONES COSMÉTICAS / PROCEDIMIENTOS

- Procedimientos con láser (fraccionales)
- Peelings químicos (superficiales)
- Rejuvenecimiento vaginal
- Microdermoabrasión
- Radiofrecuencia
- Microblading
- Microneedling / Terapia con Plasma Rico en Plaquetas (PRP)
- Terapia de inducción de colágeno
- Eliminación de tatuajes (fraccionales)
- Otros dispositivos fraccionales

INDICACIONES MÉDICAS / PROCEDIMIENTOS

- Criocirugía (queratosis actínica)
- Después de la terapia con 5-FU
- Tatuaje médico (es decir, post-reconstrucción mamaria)
- Enfermedades y reacciones cutáneas inflamatorias
- Quemaduras de 1er y 2do grado (con epidermis)

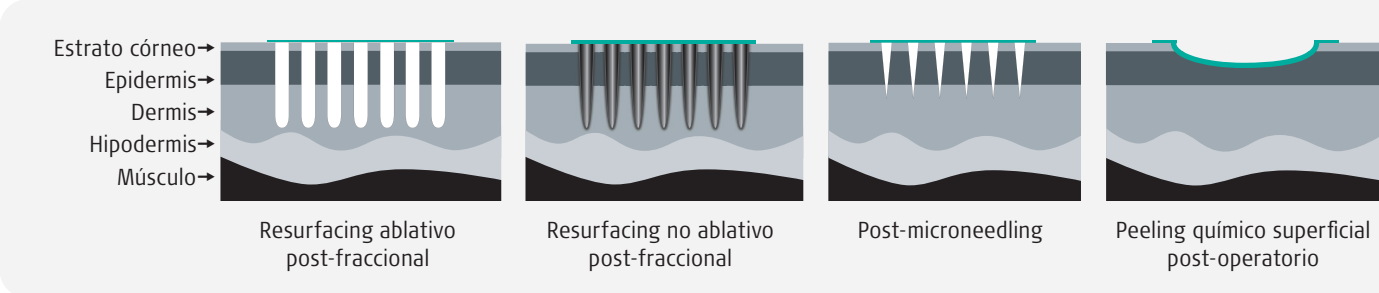

¿Por qué Stratacel® es un producto innovador?

- APÓSITO FILMÓGENO**
Stratacel se seca para formar un apósito fino, flexible y de contacto total con la herida que garantiza un contacto constante con la piel.
- INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO**
Stratacel puede utilizarse inmediatamente después de los procedimientos fraccionados.
- REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN**
Stratacel favorece un entorno de cicatrización húmedo que acelera la re-epitelización y reduce el tiempo de recuperación.
- ALIVIO SINTOMÁTICO**
Stratacel proporciona un alivio sintomático del picor, la sensación de quemazón y las molestias, y reduce el enrojecimiento y la decoloración asociados a la piel dañada.
- HIDRATACIÓN Y PERMEABILIDAD AL GAS**
Stratacel es semioclusivo y permeable a los gases, lo que permite a la piel respirar y mantenerse hidratada.
- PROTECCIÓN**
Stratacel es bacteriostático, protege la piel comprometida de la invasión química y microbiana, al tiempo que reduce el riesgo de dermatitis de contacto.
- NO REACTIVO**
Stratacel es inerte, no tiene pH medible, no contiene esteroides, alcohol, parabenos ni fragancias.
- COMPATIBLE CON COSMÉTICOS**
Una vez seco, Stratacel puede cubrirse con crema solar o cosméticos.
- FÁCIL DE USAR**
Stratacel es cómodo y fácil de aplicar en casa, sin necesidad de ser retirado antes de su re aplicación, mejorando el cumplimiento de los cuidados después de un procedimiento por parte del paciente.



Stratacel® frente a una crema a base de vaselina¹

En EE.UU. se llevó a cabo un estudio aleatorio de 20 pacientes aplicando Stratacel y producto a base de vaselina en la mitad de la cara respectivamente, para evaluar la eficacia de Stratacel para reducir el tiempo de baja, la gravedad y la duración de las reacciones inflamatorias agudas tras la aplicación de microagujas con radiofrecuencia.¹



Gold, M., Biron, J. (2019). 'Randomized, single-blinded, crossover study of a novel wound dressing vs current clinical practice after Percutaneous collagen induction therapy', *Journal of Cosmetic Dermatology*, 18(2), pp. 524-529.




Una **reducción temprana en el eritema** indica una transición más rápida a la fase de remodelación de la curación de heridas, lo que conduce a una reducción del tiempo de recuperación, alivio de los síntomas agudos y una mejora general en el resultado del tratamiento visible.

Tras **2 días después del procedimiento y de aplicar Stratacel, el tiempo de recuperación se reduce significativamente en un 50% en comparación con los productos a base de vaselina.**

Stratacel mostró una reducción del 63% mayor del eritema en comparación con el producto a base de vaselina 7 días después del procedimiento.

Stratacel **normaliza la inflamación** desde una etapa muy temprana de la curación, **reduciendo el riesgo de hiperpigmentación** post-inflamatoria y desempeña un papel importante en el tratamiento de tipos de piel más oscuros.

Análisis de hemoglobina de la Cámara Antera 3D

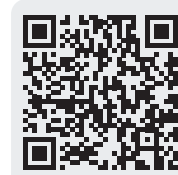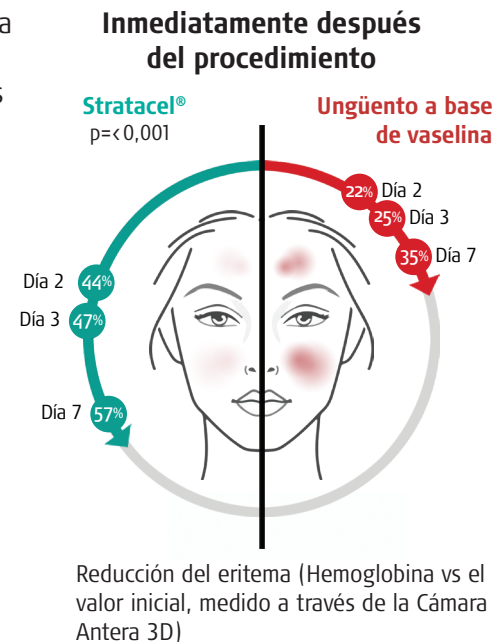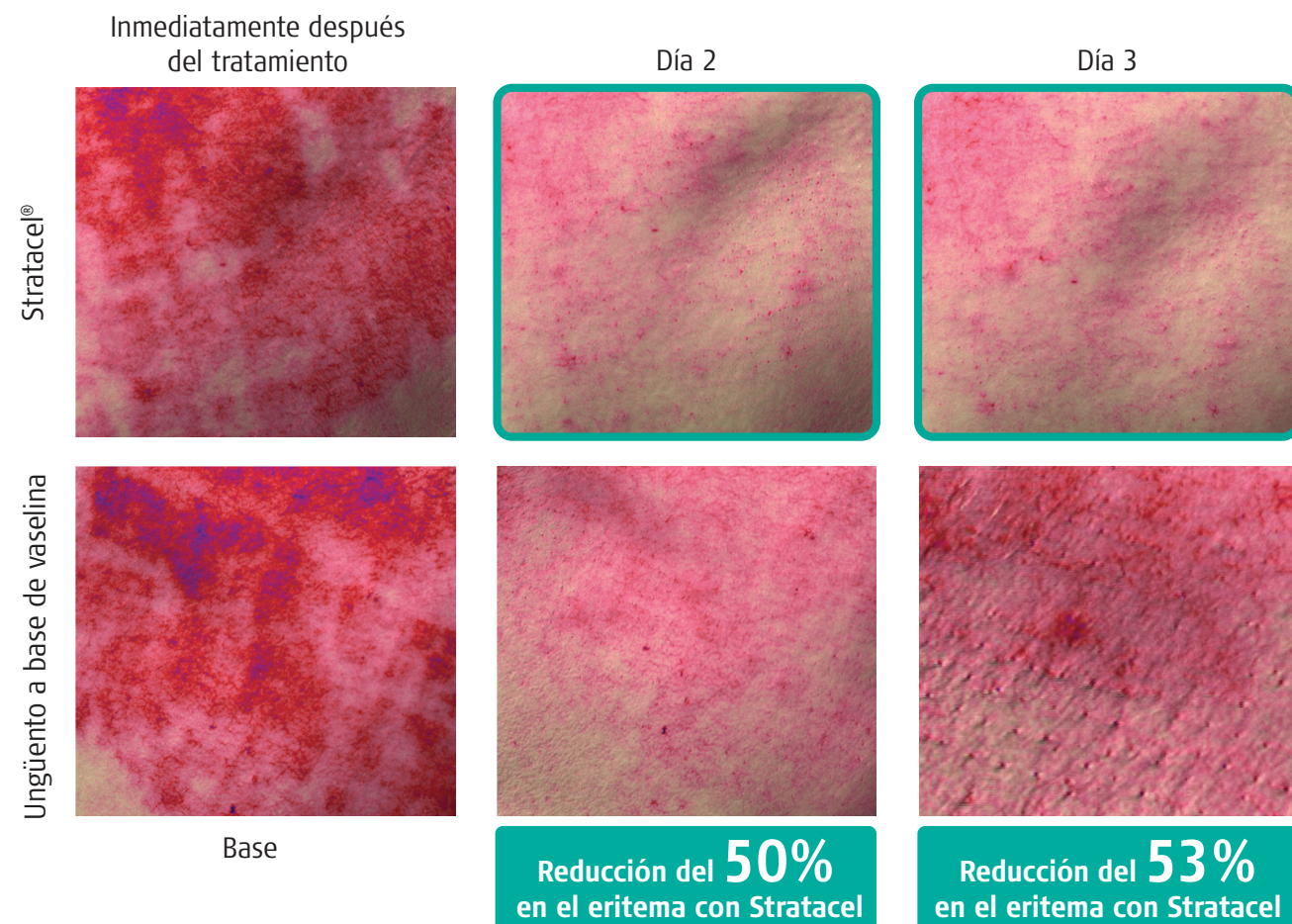

Escanee para leer el estudio publicado

Stratacel® frente a agua termal y vaselina²

En Italia se llevó a cabo un estudio simple ciego, de 5 pacientes aplicando Stratacel y tratamiento estándar (agua termal + vaselina) en la mitad de la cara respectivamente, para evaluar la eficacia de Stratacel después del rejuvenecimiento con láser de CO₂ fraccionado ablativo.



Marini, L. (2017). 'Advanced film-forming gel formula vs spring thermal water and white petrolatum as primary dressings after full-face ablative fractional CO₂ laser resurfacing: a comparative split-face pilot study', *J of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 32(1), pp. 113-116.



Escanee para leer el estudio publicado

Stratacel crea un microentorno protector estéticamente aceptable y fácil de aplicar, lo que se traduce en una **curación óptima y más rápida de la herida.**

Stratacel tiene una capacidad única para reproducir una **función de barrera epidérmica** temporal, similar a las condiciones fisiológicas normales.

7 días después del procedimiento:

- Se observó una **reducción del 85% en los cambios microtexturales de la superficie cutánea** en el lado de Stratacel, lo que confirma una reepitelización más rápida y suave.
- En el lado de Stratacel, se observa una reducción del 72% en el contenido de melanina superficial**, lo que revela **una transición más gradual entre la fase inflamatoria inicial y la fase temprana de remodelación, en comparación con el tratamiento estándar.**


Stratacel preserva la integridad de todas las células biológicamente activas, citoquinas y factores de crecimiento relacionados para que trabajen sin alteraciones durante la cicatrización de la herida, lo que **reduce el riesgo de hiperpigmentación post-inflamatoria.**

Monoterapia con **Stratacel**³

Agua termal + vaselina³




Inmediatamente después del tratamiento

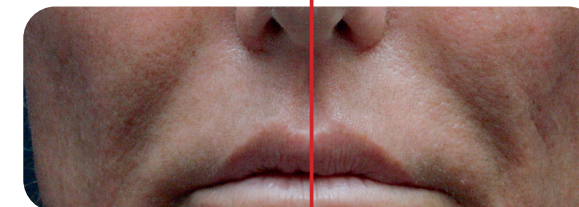

15 minutos después de la aplicación del apósito primario

Cuantificación de eritema agudo correlacionado con variaciones en la concentración de hemoglobina.³

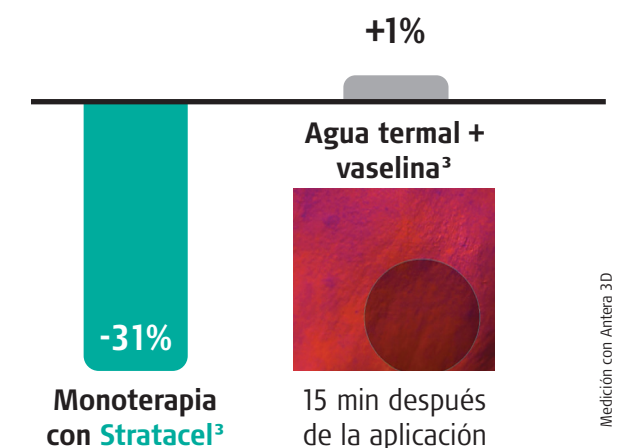

Medición con Antera 3D

Resultados clínicos con Stratacel® - Antes y después

Tratamiento correctivo - Cara⁴

Dr. Marini SDC The Skin Doctors Center, Trieste, Italia



Antes del procedimiento



Post-procedimiento, inicio del tratamiento con Stratacel




Tras 9 días de tratamiento con Stratacel

Rejuvenecimiento con láser fraccionado - Cara⁴

Dr. Marini SDC The Skin Doctors Center Trieste, Italia



Post-procedimiento, inicio del tratamiento con Stratacel

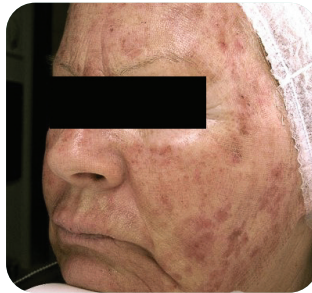

Tras 2 días de tratamiento con Stratacel



Tras 7 días de tratamiento con Stratacel

Rejuvenecimiento con láser fraccionado - Zona perioral⁵

Dr. M. Sandhofer Linz, Austria



Antes del procedimiento



Post-procedimiento, inicio del tratamiento con Stratacel



Tras 10 días de tratamiento con Stratacel

Rejuvenecimiento con láser fraccionado - Zona periorbital⁴

Dr. Marini SDC The Skin Doctors Center Trieste, Italia



Post-procedimiento, inicio del tratamiento con Stratacel



Tras 7 días de tratamiento con Stratacel



Tamaños disponibles

Stratacel es una fórmula avanzada que requiere **menos producto** por aplicación que las típicas cremas o geles hidratantes.



Stratacel 10g

es suficiente para tratar una superficie de 6x6 cm dos veces al día durante más de 60 días.

C.N.: 192570.1



Stratacel 20g

es suficiente para tratar una superficie de 6x12 cm dos veces al día durante más de 60 días.

C.N.: 192571.8

Instrucciones de uso



1. Asegúrese de que la piel afectada o la herida superficial estén limpias. Seque suavemente todo el exceso de exudado o fluido de la herida como sea posible antes de la aplicación del gel.



2. Aplique una **capa muy fina** de Stratacel directamente sobre la zona afectada y deje que el gel se seque. Si se aplica correctamente Stratacel debería secarse en 5-6 minutos. Para reducir el riesgo de reacciones, Stratacel debe aplicarse como primera capa de contacto.



3. Si tarda más en secarse, es probable que haya aplicado demasiada cantidad. Retire suavemente el exceso con un pañuelo limpio o una gasa y deje secar. Si se utiliza un apósito secundario, el secado no es necesario.



4. Una vez seco, Stratacel **puede cubrirse con protector solar, cosméticos o con la ropa**. Si siente la piel seca o tirante puede volver a aplicar Stratacel tanto como sea necesario.

Para obtener mejores resultados

- Stratacel debe aplicarse una o dos veces al día en las zonas expuestas o según sea necesario para **mantener el contacto** con la superficie afectada, o según aconseje un médico.
- Para obtener mejores resultados, Stratacel debe estar en **contacto continuo** con la piel (24 horas al día/7 días a la semana).
- Stratacel es recomendado como **tratamiento post-procedimiento inmediato** y debe continuarse hasta que la piel se haya recuperado por completo
- Para los procedimientos de rejuvenecimiento y ablativos, se recomienda el uso continuado durante un **tratamiento mínimo de 30 días** o hasta que no se observen nuevas mejoras.
- Si no se seca completamente, Stratacel puede manchar la ropa. El lavado normal no eliminará el producto de la ropa. Si se mancha, la limpieza en seco debería poder eliminarlo sin dañar el tejido.
- **No se necesitan cremas hidratantes, lociones, etc.** Stratacel puede volver a aplicarse más a menudo para evitar la sensación de piel seca y tirante, ya que Stratacel impide la evaporación del agua a través de la piel dañada que puede causar esta sensación. Alternativamente, puede aplicarse una crema hidratante después de que Stratacel se seque para mantener el primer contacto de Stratacel con la piel. A diferencia de Stratacel, las cremas hidratantes pueden provocar irritaciones, y algunas de ellas son totalmente oclusivas (lo que significa que no permiten el intercambio de gases a través de la piel). Añadir cualquier producto adicional sobre Stratacel puede reducir la eficacia de Stratacel.
- Stratacel **no necesita frotarse ni masajearse**, ya que no penetra por debajo del estrato córneo y no potenciará su efecto.
- Stratacel también puede utilizarse junto con otros tratamientos complementarios para mejorar los resultados generales.
- Stratacel **no debe aplicarse** sobre medicamentos tópicos a menos que lo aconseje un médico.
- Stratacel **puede guardarse en el frigorífico** antes de su aplicación para aliviar más rápidamente la sensación de quemazón después del procedimiento.

IMPORTANTE

Dado que Stratacel es semioclusivo:

- Stratacel puede potenciar el efecto de un ingrediente activo si Stratacel se aplica sobre el principio activo.
- Stratacel puede impedir o reducir absorción de ingredientes activos si se aplican sobre Stratacel.

Stratacel®

apósito avanzado para el cuidado de tratamientos fraccionados

Stratacel® - Curación más rápida y reducción significativa en el tiempo de recuperación tras procedimientos fraccionados



Aplicación inmediata después de procedimientos fraccionales. Una vez seco, puede cubrirse con protector solar o cosméticos.



Stratacel es un apósito para heridas que promueve un ambiente de curación húmedo que conduce a:

- Cicatrización más rápida (reepitelización)
- Reduce la inflamación, enrojecimiento y sensación de quemazón



Permeable a los gases, permite que la piel respire y se mantenga hidratada.



Bacteriostático, lo que reduce el riesgo de infección.



Fácil de aplicar

Para consultas o pedidos:

Email: es.pedidos@stratpharma.com | Teléfono: +34 659 100 762

www.es.stratacel.com

Precauciones: Lea siempre la etiqueta, utilice sólo según las indicaciones. Sólo para uso externo. Stratacel no debe entrar en contacto con los ojos. Stratacel no debe aplicarse sobre medicamentos tópicos a menos que se lo indique su médico. Stratacel puede manchar la ropa si no se seca completamente. Si se mancha, la limpieza en seco debería poder eliminarlo sin dañar el tejido. Para una correcta conservación, vuelva a cerrar bien el tubo con el tapón. Si su herida muestra signos de infección o no cicatriza después de 30 días de la aplicación inicial del producto, consulte con su médico. Si se produce irritación, interrumpa el uso y consulte con su médico. No es adecuado para heridas muy exudativas, heridas tunelizadas o quemaduras de 3er grado. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar después de la fecha de caducidad (EXP) indicada en el tubo. La fecha de caducidad (EXP) no cambia una vez abierto el tubo. No utilizar si el tubo está dañado. Stratacel no requiere métodos especiales de eliminación. Siga las normas locales de eliminación. Estéril hasta su apertura.

Composición: Polidimetilsiloxanos, siloxanos, alquilmetil siliconas.

Referencias: 1. Gold, M., et al. (2019). *J of cosmetic dermatology*, 18(2), pp. 524-529. 2. Marini, L. (2017). *J of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 32(1), pp. 113-116. 3. Data on file, 2017 (Dr. Marini). Stratpharma AG. 4. Courtesy of Leonardo Marini, MD – SDC The Skin Doctors Center Trieste, Italy, 2017. 5. Sandhofer, M., Schauer, P. (2012). *SKINmed*, 10(6), pp. S1-S7.

Fabricado por: Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basilea, Suiza
Stratpharma Iberia SL: Pº de la Castellana, 216 - 8ª Planta (Torre Realía), 28046 Madrid, España



Producto Sanitario de Clase IIa
Registrado por la FDA

 **Stratpharma**
Iberia

SC-ES-013-2-0324